


DIGITÁLIS HŐMÉRŐ RUGALMAS MÉRŐFEJJEL TH3302

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, valamint az útmutatót tartsa biztonságos helyen! Digitális hőmérő LCD kijelzővel a könnyű leolvasásért. 60 másodperc alatt méri meg a test hőmérsékletét. Gyors és pontos, hangjelzéssel jelzi, ha a mérés befejeződött. Az utolsó mérés eredményét tárolja, hogy össze tudja hasonlítani a később mért értékekkel. Használata rendkívül egyszerű, a sérülés elkerülése érdekében praktikus táskában van tárolva. A mérőfej mosható, és a készülék automatikusan kikapcsol.

Laica S.p.A. - Viale del Lavoro, 10 - Fraz. Ponte - 36021 Barbarano Vicentino (VI) - ITALY Fax: +39-0444-795324

Származási hely: Kína

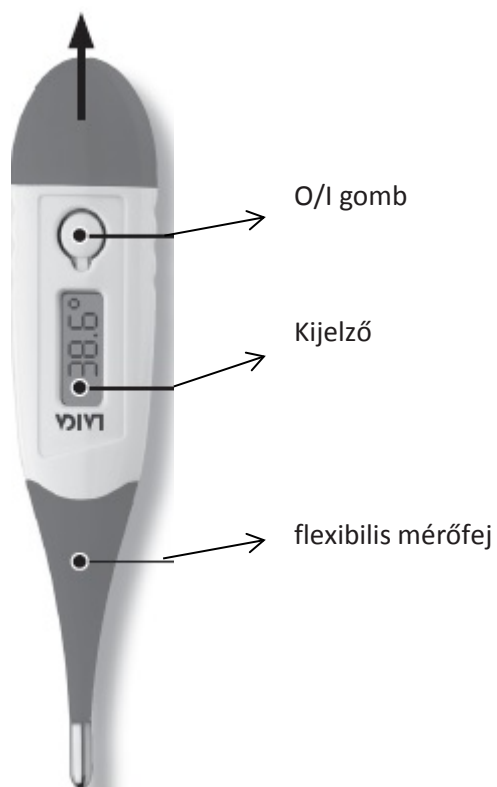

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

- 1) A testhőmérséklet mérése csak ellenőrzés, nem jelent sem diagnózist, sem kezelést. Ha bármilyen szokatlan értéket észlel, azonnal forduljon orvosához! Semmilyen körülmények között ne változtassa meg az orvosa által felírt gyógyszeradagot.
- 2) Ne szorítsa, hajlítsa meg, ne ejtse le, harapja meg vagy szedje darabokra a hőmérőt.
- 3) Gyermekektől elzárva tartandó.
- 4) Ne tegye ki közvetlen napsütésnek, vagy hőforrásnak. Tiszta, száraz helyen tartsa.

- 5) A hőmérőt ne mártsa vízbe vagy más folyadékba, mivel csak a mérőfej vízálló.
- 6) Ne végezzen mérést, amikor a hőmérő nedves, mert a mérési eredmények pontatlanok lehetnek.
- 7) A hőmérőt hónaljban, szájbán vagy végbélnyílásban lehet használni. Ne használja fülön keresztül.
- 8) Mérés előtt ne fogyasszon forró vagy hideg ételt, italt, ne dohányozzon, és ne zuhanyozzon.
- 9) Végbélen keresztüli hőmérést követően ne használja a hőmérőt szájon keresztüli hőmérésre előzetes fertőtlenítés nélkül.
- 10) Két évesnél fiatalabb gyermekek esetében ne végezzen szájon keresztüli hőmérést.

AZ ELEMÉK BEHELYEZÉSE/CSERÉJE

- 1) Az elemfedőt húzza a jelzett irányba.
- 2) Egy hegyes tárgy segítségével távolítsa el az elemet.
- 3) Az új elemet a pozitív oldalával felfelé, a negatív oldalával lefelé helyezze be.
- 4) Helyezze vissza a fedelet. Ha a kijelzőn a " " és a "' ' jel jelenik meg, akkor az elemeket ki kell cserélni.
- 5) Az elemet ne a háztartási szemétkébe, hanem szelektív hulladékgyűjtőbe dobja. Figyelem: Biztonsági okokból célszerű, ha, 12 év alatti gyermek nem cseréli az elemet.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Minden használat előtt és/vagy után a mérőfejet alkohollal fertőtlenítse le.

SZÁJON ÉS VÉGBÉLEN KERESZTÜLI HASZNÁLAT:

- 1) Az O/I gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket. Ekkor a készülék egy rövid hangjelzést ad, majd pár másodpercre megjelenik az összes ikon a kijelzőn. Ezután a kijelző az utolsó mért értéket mutatja az L °C felirat mellett. Mikor a °C felirat elkezd villogni, a készülék használatra készen áll.
- 2) A mérőfej elhelyezése: szájbán: a mérés előtt 5 percig tartsa csukva a száját, hogy a hőmérséklet stabilizálódjon. A hőmérőt helyezze a nyelv alá, majd tartsa csukva száját, míg a mérés befejeződik. A szájbán mért átlaghőmérséklet 37°C. Végbélnyílásban: A mérőfejet kenje be valamilyen zselés, vízben oldódó oldattal. Ne használjon vazelint. A hőmérőt 60 másodpercig tartsa a végbélben kb. egy centi mélyen. Az átlaghőmérséklet itt 37.5°C. Ne erőltesse a hőmérőt a végbélbe. Amennyiben a bevezetés fájdalmat okoz, azonnal szakítsa meg a hőmérést. Ezen figyelmeztetés be nem tartása sérüléseket okozhat.

HÓNALJBAN VALÓ HASZNÁLATHOZ KÖVESSE AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT:

- 1) A hónaljat törölje szárazra. A mérés előtt a karját 5 percig tartsa a csípőhöz szorítva, így a hőmérséklet stabilizálódik. A hőmérőt helyezze a hónalja alá, és karját szorítsa a mellkasához. (Így megakadályozható, hogy a szobahőmérséklet befolyásolja az eredményt.)
- 2) Az O/I gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket. Ekkor a készülék egy rövid hangjelzést ad, majd pár másodpercre megjelenik az összes ikon a kijelzőn. Ezután a kijelző az utolsó mért értéket mutatja az L °C felirat mellett. Mikor a °C felirat elkezd villogni, a készülék használatra készen áll. A hőmérséklet kb. 60 másodperc után stabilizálódik. Az átlaghőmérséklet a hónaljban 36.5°C.
- 3) Mikor a készülék hangjelzést ad, távolítsa el a hónaljtól, a mérés befejeződött. Az eredményt a kijelzőn olvashatja. Ha a készülék használaton kívül van, 10 perc után automatikusan kikapcsol (addig a kijelzőn az eredmény látható). Ha ezt nem várja meg, a készüléket az O/I gombbal kapcsolhatja ki.

KARBANTARTÁS

A hőmérő mérőfejét minden használat előtt és/vagy után tisztítsa meg alkoholos ronggyal, vagy más fertőtlenítőszerrel. Minden más tisztítószer használata károsíthatja a készüléket. A hőmérőt magát száraz ronggyal törölje át. A hőmérőt ne tegye vízbe vagy más folyadékba. Soha ne használjon vegyi anyagot vagy súrolószert a tisztításhoz. A mérőfej a hőmérő legtörékenyebb része, ezért tisztítását nagy gonddal végezze. A kijelzőt soha ne tisztítsa alkohollal. A hőmérőt közvetlen napfénytől elzárva, száraz, hűvös helyen tartsa. Ne fertőtlenítsen vagy főzze ki a hőmérőt. A hőmérőt a tokjában tartsa.

TECHNIKAI ADATOK

Fontos! Olvassa el figyelmesen a használati utasítást!
BF típusú készülék

Mérési tartomány: 32.0°C - 42,9°C

Tolerancia: +/-0,1°C (35,5°C - 42,0°C)

Kijelző: folyadékkristályos

Akkumulátor: 1x1.5V típus LR/SR-41

Akkumulátor autonómia: kb. 200 óra folyamatos használat

Súly: 12 g

Méret: 124x24x12 mm

Működési feltételek: 10°C - 40°C, (15-95)% relatív páratartalom mellett

Tárolási feltételek: 10°C - 55°C, (15-95)% relatív páratartalom

IP22: Elektromos készülékek csomagolásának védettségi foka, ahol az első számjegy a külső szilárd testek behatolásával szembeni (0-6), míg a második számjegy a folyadékok behatolásával szembeni védettségi fokot (0-8) jelöli.

ELEKTROMÁGNESES KOMPATIBILITÁS

Jelen készülék megfelel az elektromágneses kompatibilitásra (EMC) vonatkozó hatályos előírásoknak és otthoni környezetben történő használatra tervezték: a kibocsátások mértéke rendkívül alacsony és nem interferál más készülékekkel. Amennyiben más készülékek közelében használják, javasoljuk, hogy kövessék a használati utasítások végén található táblázatban feltüntetett utasításokat. Speciális mobil kommunikációs készülékek és rádiós rendszerek hatással lehetnek jelen készülék működésére. Amennyiben a működés során rendellenességet észlel, javasoljuk, hogy távolítsa el a készüléket a többi, elektromágneses interferenciát okozható készüléktől és ellenőrizze a készülék működésének helyreállítását. Mindenesetre, további kétség esetén, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal vagy tanulmányozza a jelen használati útmutató végén található, az elektromágneses kibocsátásokra vonatkozó táblázatokat.

ÁRTALMATLANÍTÁS (Dir. 2012/19/Eu-WEEE)

A készülék alján lévő szimbólum az elektromos és elektronikus készülékek szelektív gyűjtését jelzi. A készülék élettartama végén ne ártalmatlanítsa azt a vegyes háztartási hulladékokkal, hanem adja át egy megfelelő helyi hulladékgyűjtő központnak vagy szolgáltatassa vissza a viszonteladónak egy azonos típusú és funkciójú új készülék vásárlásakor.

Amennyiben az ártalmatlanítandó készülék mérete 25cm-nél kisebb, lehetőség van annak 400 nm-nél nagyobb alapterületű viszonteladónál történő leadására, hasonló készülék

vásárlási kötelezettsége nélkül. Az elektromos és elektronikus készülékek szelektív gyűjtése a közösségi környezetvédelmi politikának megfelelően kerül végrehajtásra, melynek célja a környezet védelme és a környezet minőségének a javítása, valamint annak az elkerülése, hogy a készülékben található esetleges veszélyes anyagok, ezek vagy ezek részeinek a helytelen felhasználása káros hatással legyenek az emberi egészségre. Figyelem! Az elektromos és elektronikus készülékek helytelen ártalmatlanítása büntetést vonhat maga után.

GARANCIA

A készüléket a vásárlástól számított 2 éves garancia fedi. A vásárlás dátumát a viszonteladó bélyegzőjének vagy aláírásának és a számlának kell tanúsítania, ezért a mellékelt számlát gondosan meg kell őrizni. Ez az időszak megfelel az érvényben lévő előírásoknak (A fogyasztóvédelmi törvénykönyv 2005/09/06-i 206. sz. törvényrendelete) és csak akkor alkalmazható, ha a vásárló magánszemély. A Laica termékek háztartási használatra készültek és ezért nem használhatók közszolgálatokban. A garancia csak a gyártási hibákra érvényes és nem alkalmazható akkor, ha a hibát véletlen esemény, helytelen használat, hanyagság vagy a termék nem megfelelő használata okozta.

Csak a mellékelt kiegészítőket használja. Az ezektől eltérő kiegészítők a garancia érvényvesztését okozhatják.

Semmilyen okból ne nyissa ki a mérleget. Kinyitás vagy módosítás esetén a garancia véglegesen érvényét veszíti. A garancia nem érvényes a kopásnak kitett alkatrészekre és a mellékelt elemekre. A vásárlás után 2 évvel a garancia lejár. Ezután a Műszaki támogatás beavatkozásaiért fizetni kell.

A Műszaki támogatás beavatkozásaival kapcsolatos információkért, érvényes garancia vagy fizetés esetében is, küldjön e-mailt a szerviz@silko.hu címre. Érvényes garancia esetén a termékek javításáért vagy cseréjéért nincs szükség semmiféle hozzájárulásra.

Hiba esetén forduljon a viszonteladóhoz, NE küldje el a terméket közvetlenül a LAICA címére.

A garanciális beavatkozások (beleértve a termék vagy annak egy alkatrészének a cseréjét) nem hosszabbítják meg a kicserélt termék eredeti garanciájának az időtartalmát. A gyártó nem vállal semmiféle felelősséget sem az esetleges károkért, melyek közvetlenül vagy közvetetten a személyeket, tárgyakat vagy háziállatokat érintik a megfelelő használati utasításban foglalt összes utasítás, és elsősorban a készülék telepítésével, használatával és karbantartásával kapcsolatos utasítások be nem tartása esetén. Mivel folyamatosan a termékek javításán dolgozik, a Laica fenntartja magának a jogot a termékek vagy azok részeinek az előzetes értesítés nélküli módosítására, anélkül, hogy ez bármiféle felelősséget jelentene a Laicára vagy a viszonteladókra nézve.